


The World's First True Disposable Hemocytometer

日頃のご愛顧に感謝しまして

ディスポーザブル血球計算盤


C-Chipキャンペーン

キャンペーン期間: 2023年1月23日(月) - 3月31日(金)

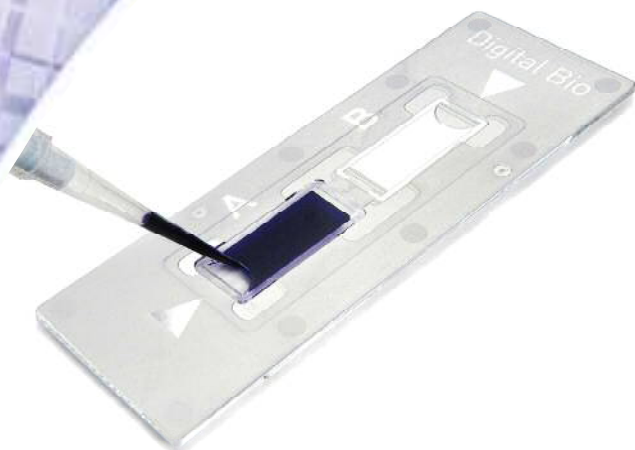

特長

- 感染性のサンプルへの接触の機会の低減
- カバーガラス不要
- 洗浄不要
- コンタミネーションの減少
- 高い信頼性と再現性
- 1枚で2サンプル測定可能

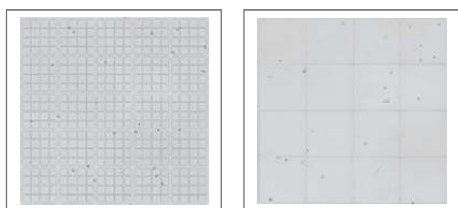


仕様


サイズ : 25(W)x75(L)x厚さ1.6mm
 チャンバーの厚み : 100, 200 μm
 チャンバーボリューム : 10 μL (DHC-N01, DHC-B02)
 20μL (DHC-F01)

グリッドパターン


ノイバウエル改良型

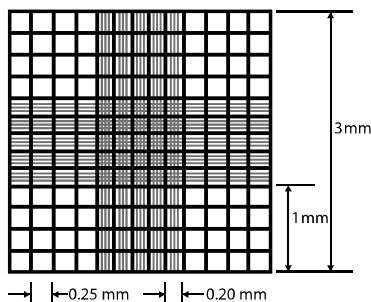

ビルケルチュルク型

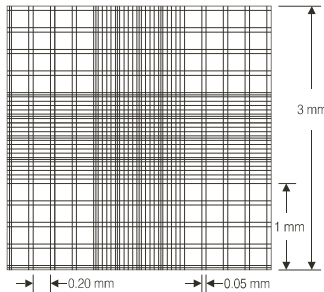

フックスローゼンタール型

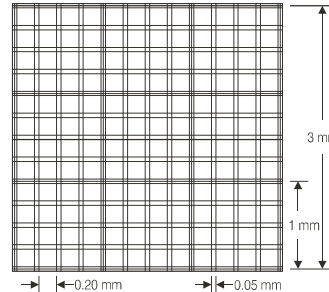

製品名	型番	グリッドタイプ	容量	価格	キャンペーン価格
C-Chip	DHC-N01	ノイバウエル改良型	100枚セット (200サンプル分)	28,000円	21,600円
	DHC-B02	ビルケルチュルク型			
	DHC-F01	フックスローゼンタール型			

蛍光染色式オートセルカウンター ADAM-MC


蛍光染色により精度が高い結果が得られます!!

特徴

- ・最大22フレームの画像から結果を得るので高精度
- ・PI染色による蛍光検出で低いカウンティングミス、低いノイズ
- ・オートフォーカス機能搭載
- ・PC(OS:Windows 7/8/10)に接続してデータを取得可能



*モニターは付属しません。

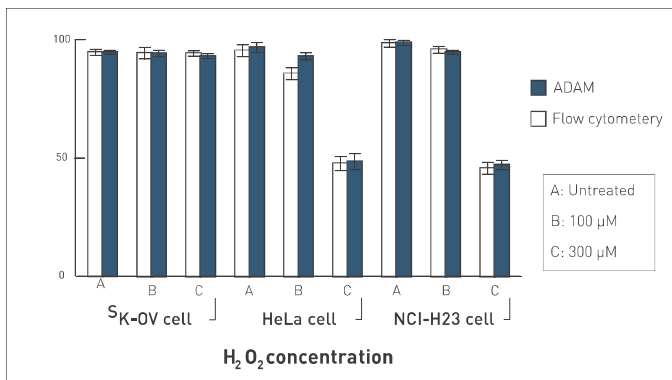


(左図)

SK-OV、HeLa、NCI-H23細胞を過酸化水素水(100 μMと300 μM)で3時間処理して、細胞の生存率をADAMとフローサイトメトリーで測定し比較しました。

(右図)

異なる細胞濃度を3種類(High、Medium、Low)調整して、ADAM-MCで10回測定しました。ADAM-MCは低いCVを与えます。

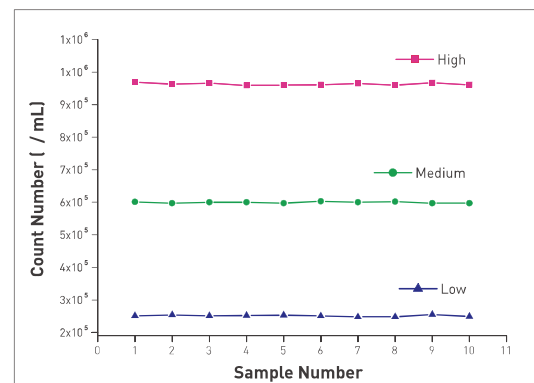

	Low Sample	Medium Sample	High Sample
	n=10	n=10	n=10
MEAN	2.51 X10 ⁵	5.99X10 ⁵	9.63X10 ⁵
SD	0.24 X10 ⁵	0.23X10 ⁵	0.35X10 ⁵
CV	0.95 %	0.38 %	0.36 %

型番	製品名	通常価格	クリアランス価格
ADAM-MC	セルカウンターADAM-MC	550,000円	400,000円

在庫が無くなり次第終了します。

消耗品

- ・ AccuChip4x Kit 型番AD4K-200 定価¥58,000-
内容: AccuChip 4チャンネルチップ 200枚,
AccuStain Solution (N液: 12.5mlx1本, T液: 12.5mlx2本)

- ・ AccuStain Solution 型番ADR-1000 定価¥19,800-
内容: AccuStain Solution (N液: 12.5mlx2本, T液: 12.5mlx4本)

・価格には消費税は含まれていません。
・本パンフレット記載の製品は、全て研究用として販売しています。医療・診断目的用途としては使用できません。
・仕様、数量等は予告なしに改定する場合がございますので、予めご了承ください。

エア・ブラウン株式会社

ライフサイエンス部

東京: 〒104-0061 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング
TEL.03-3545-5720 / FAX. 03-3543-8865

大阪: 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グラフワト大阪 7F-B
TEL.06-7739-7114 / FAX. 06-7739-7115

URL: <https://www.arb-ls.com/>

email: arb-lsdept1949@arbbrown.com

販売代理店