

【クリアランスセール】

CAPRICA® ユニバーサルピペットフィルターチップ

KIMBLE® パスツールピペット・テストチューブ



CAPRICA Filter Tip, DNase/RNase free & Sterile

クロスコンタミネーションに敏感なアッセイや、サンプルがピペットの下部を汚染する可能性がある場合は、フィルターチップを使用するのが効果的です。フィルターは、ピペット内の液体の飛散や、ピペッティング中のエアロゾルがピペットチップコーンに侵入するのを防ぎます。

最高レベルの純度が要求されるアプリケーションでは、ヒトDNA、DNase、RNase、エンドトキシンを含まない滅菌済みフィルターチップを使用します。チップのラックは個別に袋詰めされ、ガンマ線照射によって滅菌されます。

UNIVERSAL FIT

大手ブランドにフィットするようにデザインされています!!

HIGH QUALITY

超高分子量ポリエチレン製で湾曲しません。

NON-STICK RESIN

低い残留量チップにより粘度のある物質や界面活性剤を含む分子生物用途のアプリケーションに最適



型番	仕様	入数(本数/ラック)	通常価格	クリアランス価格
35000010	10 µL	50ラック(96本/ラック)	68,000円	47,600円
35000020	20 µL	50ラック(96本/ラック)	68,000円	47,600円

パスツールピペット(材質:ホウケイ酸ガラス)




KIMBLEブランドのパスツールピペット、テストチューブは、ホウケイ酸ガラスで製造されており、幅広く使用されています。

型番	仕様	入数	通常価格	クリアランス価格
M4150N0250SP4	150 mm、綿栓無	250本x4pack	8,400円	4,900円



テストチューブ(材質:ホウケイ酸ガラス)


型番	容量	サイズ	入数	通常価格	クリアランス価格
A507510000611	4 ml	10 x 75 mm	250本x4pack	9,800円	5,500円
A507512000611	6 ml	12 x 75 mm	250本x4pack	10,400円	6,000円
A510016000711	15 ml	16 x 100 mm	250本x4pack	19,400円	10,800円
A512516000711	16 ml	16 x 125 mm	250本x4pack	23,000円	13,000円
A515016000711	22 ml	16 x 150 mm	250本x4pack	26,000円	14,500円

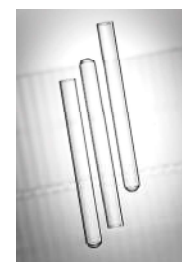

蛍光染色により精度が高い結果が得られます!!

特徴

- ・ 最大22フレームの画像から結果を得るので高精度
- ・ PI染色による蛍光検出で低いカウンティングミス、低いノイズ
- ・ オートフォーカス機能搭載
- ・ PC(OS:Windows 7/8/10)に接続してデータを取得可能

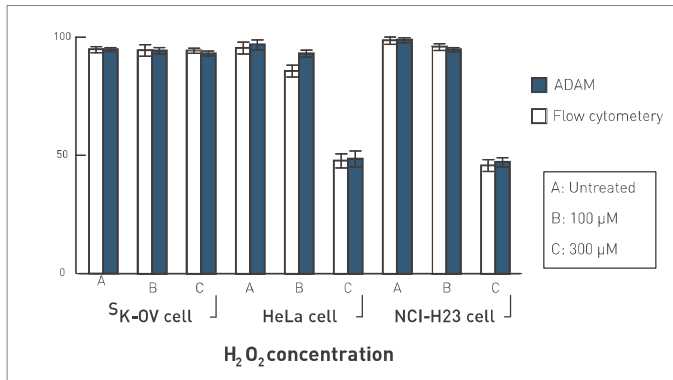


(左図)

SK-OV、HeLa、NCI-H23細胞を過酸化水素水(100 μMと300 μM)で3時間処理して、細胞の生存率をADAMとフローサイトメトリーで測定し比較しました。

(右図)

異なる細胞濃度を3種類(High、Medium、Low)調整して、ADAM-MCで10回測定しました。ADAM-MCは低いCVを与えます。

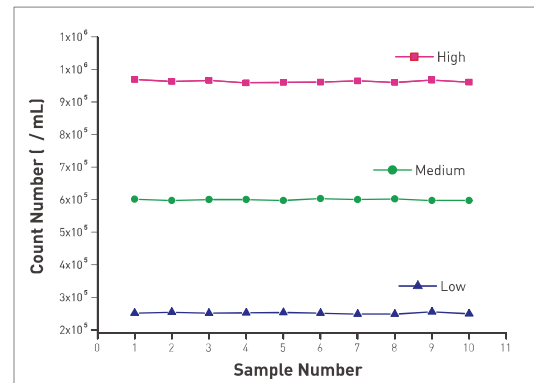

	Low Sample	Medium Sample	High Sample
	n=10	n=10	n=10
MEAN	2.51 X10 ⁵	5.99X10 ⁵	9.63X10 ⁵
SD	0.24 X10 ⁵	0.23X10 ⁵	0.35X10 ⁵
CV	0.95 %	0.38 %	0.36 %

製品仕様

型番	ADAM-MC
測定時間	~2分/テスト(設定条件により異なります)
測定可能細胞サイズ	粒径 >3 μm
測定細胞濃度範囲	5X10 ⁴ ~4X10 ⁶ cells/ml
カメラ	B/W CCD
機器サイズ	220(W) x 375(D) x 250(H) mm
重量	9 kg

消耗品

- ・ AccuChip4x Kit 型番AD4K-200
内容: AccuChip 4チャンネルチップ 200枚,
AccuStain Solution (N液:12.5mlx1本, T液:12.5mlx2本)
- ・ AccuStain Solution 型番ADR-1000
内容: AccuStain Solution (N液:12.5mlx2本, T液:12.5mlx4本)

型番	製品名	通常価格	クリアランス価格
ADAM-MC	セルカウンター-ADAM-MC	550,000円	400,000円

在庫が無くなり次第終了します。

・価格には消費税は含まれていません。
・本パンフレット記載の製品は、全て研究用として販売しています。医療・診断目的用途としては使用できません。
・仕様、数量等は予告なしに改定する場合がございますので、予めご了承ください。

エア・ブラウン株式会社

ライフサイエンス部

東京: 〒104-0061 東京都中央区銀座8-13-1 銀座三井ビルディング
TEL.03-3545-5720 / FAX. 03-3543-8865

大阪: 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グラフोट大阪 7F-B
TEL.06-7739-7114 / FAX. 06-7739-7115

URL: <https://www.arb-ls.com/>

email: arb-lsdept1949@arbbrown.com

販売代理店